

スイングタイプ

RF-109K ロータ ¥39,000

種 類	金属バケット					
品 名	MA-109K	MB-109K	MC-109K	MD-109K	MEP-109K	MO-109K
						
容 量	15mL × 4 本 (ガラス/コニカル管)	15mL × 8 本 (ガラス/コニカル管)	15mL × 16本 (ガラス)	50mL × 4 本 (ガラス)	50mL × 4 本 (コニカル管)	15mL × 24本 (ガラス)
最大チューブ径(Φmm)	16.0 ~ 17.5	16.0 ~ 17.5	16.0 ~ 17.5	35.0 ~ 35.5	29.0	16.0 ~ 17.5
チューブ長(Lmm)	100 ~ 120	100 ~ 120	100 ~ 110	100 ~ 110	116	100 ~ 110
最高回転数(rpm)	4000	4000	4000	4000	4300	4000
最大遠心力(×g)	2600	2600	2600	2600	3000	2600
価 格	¥18,000	¥19,500	¥34,000	¥44,000	¥50,000	¥50,000

※アダプタは樹脂製
となります




RF-109K
スイングロータ

RENEWAL!
2000 × g対応

種 類	樹脂ケース						
品 名	PA-109	PB-109	PC-109	PD-109	PE-109	PNS-109	PL-109
							
容 量	10mL × 24本 (ガラス)	15mL × 16本 (ガラス)	6 mL × 40本 (ガラス)	ミクロ × 48本	10mL × 16本 (ガラス)	15mL × 24本 (ガラス)※	5mL採血管 × 24本 (ガラス)
チューブ径(Φmm)	12.5 ~ 13.3	13.0 ~ 17.5	12.5 ~ 13.0	9.5 ~ 11.2	12.5 ~ 13.3	12.0 ~ 17.5	12.5 ~ 13.0
チューブ長(Lmm)	95 ~ 105	80 ~ 105	65 ~ 80	36 ~ 60	100 ~ 110	80 ~ 110	65 ~ 80
最高回転数(rpm)	3000	3000	3000	3000	3000	3600	3000
最大遠心力(×g)	1460	1430	1160	外側 1140 内側 990	1460	2030	1160
価 格	お問合せ下さい					¥48,000	お問合せ下さい

※5 ~ 10mL採血管 /
尿沈査スピッツ対応

品 名 H-19Rα専用架台 品 名 底上げゴムRC-014-20
価 格 ¥100,000 価 格 ¥1,000

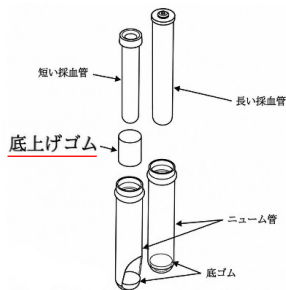


株式会社コクサン

<https://kokusan.co.jp>

- 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6
田井中ビル
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
- 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1
角田ビル小倉902号
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436

※ 掲載価格は全て税別となります / 表示価格は、2025年4月現在の価格となります / 価格、仕様などはお断りなく変更する場合がございますので予め
ご了承ください / 画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります / その他お問い合わせは、最寄りの営業所までお問合せ下さい

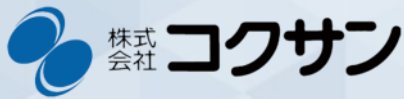

ノンフロンモデルとなって再登場！



冷却小型卓上遠心機

H-19Rα

SMALL SIZE & TABLE-TOP REFRIGERATED CENTRIFUGE

最高回転数	4300 rpm (RF-109K・MEP-109K使用時)	温度設定範囲	-10 ~ 30℃ (デジタル表示・1℃単位で設定可)
最大遠心力	3000 × g (RF-109K・MEP-109K使用時)	メモリー数	6メモリー + マニュアルモード
最大容量	360 mL	運転機能	ステップモード、密度勾配モード、 × g・secモード、フラッシュ運転
電 源	単相 AC100V 7A 0.7kVA 50/60Hz	加 速	3段階選択方式
消費電力	定格300W、ピーク370W	減 速	3段階選択方式 + 自然減速
電撃保護	クラスⅠ機器 ※医療機器の電撃保護に関するクラス分類	冷媒・充填量	R1234yf・0.21 kg
回転数設定範囲	100 ~ 4300rpm (デジタル表示・10rpm単位で設定可)	寸 法	幅364mm×奥行530mm×高さ395mm (ドア全開時840mm)
遠心力設定範囲	10 ~ 3000 × g (デジタル表示・10×g単位で設定可)	コードの長さ	2.3 m
タイマー 設定範囲	1 ~ 999秒 (デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可)	重 量	49.0 kg
	1 ~ 999分 (デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可)	価 格	¥540,000 (本体のみ)

ノンフロンモデルの詳細はこちら



OPEN

ーフロン排出抑制法により、お客様の現場環境が大きく変わっていますー

ノンフロンモデル登場

▶ ノンフロン遠心機のメリット

容易な管理

POINT1 簡易点検の省略 フロン排出抑制法に基づく 3か月に1回以上の冷凍機簡易点検の実施及び実施記録の保管が必要ございません

POINT2 書類作成の省略 廃棄時、廃棄依頼書の作成・廃棄後の引取証明書保管(3年)の義務がございません

POINT3 算定漏えい量の報告の省略 フロン類の漏えいが生じた場合、漏えい量を国に対して報告する義務がございません



コスト削減

POINT1 廃棄時コスト軽減 フロン類使用機器には廃棄時の回収が義務付けられておりますが、ノンフロン機種は回収費用を軽減することが可能

POINT2 労務コストの軽減 冷凍機簡易点検を含む日々の機器管理廃棄時手続き等の書面作成労務コストの削減が可能



ノンフロン機種で
便利に使いやすく
持続可能な社会へ

ECO Friendly · Safe and Secure

▶ フロン排出抑制法とは？

オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類の世界的な規制強化を受け、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対し包括的な対策を実施するためフロン回収・破壊法を改正し、2015年4月に施行された法律です


▶ グリーン冷媒「R1234yf」を採用

環境にやさしく、安全性の高い冷媒を使用しております

	R1234yf
オゾン破壊係数(ODP)	0
地球温暖化係数(GWP)	<1



▶ これまでの国内フロンガス規制動向

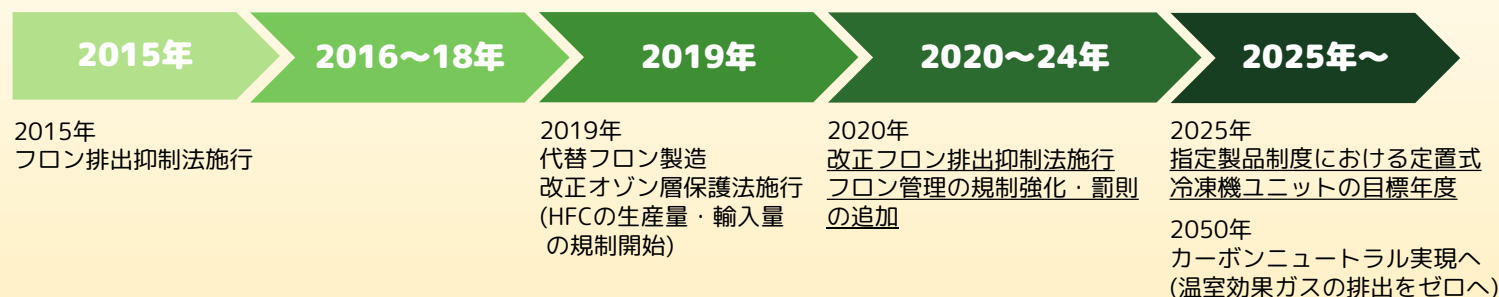

ポイント1

2020年 フロン排出抑制法改正 施行
冷却遠心機が第一種特定製品の該当機種となり
3ヶ月に1回以上の点検義務化・廃棄時に関わる管理義務化

ポイント2

2025年のGWP目標値
2025年の圧縮機の定格出力1.5kW以上のコンデンシングユニット及び
定置式冷凍機ユニット製品のGWP目標値1500以下
一部冷却遠心機はこの目標設定に該当
→ **コクサンの冷却遠心機は目標値をクリア！**

製品ラインナップ



H-19Rα 冷却小型卓上遠心機

最大容量	360ml
最高回転数	4300rpm
最大遠心力	3000 × g
寸法	W440×D530×H395
価格(税別)	¥ 540,000



H-60R 冷却小型遠心機

最大容量	1080ml
最高回転数	15000rpm
最大遠心力	16110 × g
寸法	W480×D633×H850
価格(税別)	¥ 880,000



H-80Rα 冷却多本架遠心機

最大容量	3200ml
最高回転数	15000rpm
最大遠心力	16110 × g
寸法	W515×D660×H855
価格(税別)	¥ 1,030,000



H-201FR 冷却高速遠心機

最大容量	2000ml
最高回転数	20000rpm
最大遠心力	35810 × g
寸法	W467×D633×H850
価格(税別)	¥ 1,450,000